

# ТЕСТЫ

EVITEST



EVIPLAN®



# Определение товара

- Экспресс-тесты для определения «гормона беременности» - хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в моче для ранней диагностики беременности.
- Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ)- белковый гормон, секретирующийся развивающейся плацентой.



# Хорионический гонадотропин человека

- Синтез ХГЧ осуществляется клетками трофобласта после имплантации эмбриона и продолжается в течение всей беременности.
- Имплантация эмбриона происходит на 7-9 день после оплодотворения.
- Оплодотворение происходит во время овуляции в течение 12ч., в противном случае яйцеклетка погибает.
- **Овуляция происходит в среднем в середине цикла, т.е. на 13-14 день.**
- Уровень бета-ХГЧ **крови** уже на **6 - 8 день** после зачатия позволяет диагностировать беременность.
- **В моче** достигает диагностического уровня на 1 - 2 дня позже, чем в сыворотке крови, т.е. на **7-10 день** беременности.
- При нормальном течении беременности, в период между 2 - 5 неделями беременности содержание  $\beta$ -ХГЧ удваивается каждые 1,5 суток.
- **Чувствительность метода по крови** в большинстве случаев позволяет диагностировать беременность **уже на 1 - 2 днях задержки менструации**, но, из-за индивидуальных различий в скорости синтеза ХГЧ у женщин, лучше проводить исследование не ранее 3 - 5-дневной задержки менструации во избежание ложноотрицательных результатов. В случае сомнительных результатов тест следует повторить дважды с интервалом в 2 - 3 дня.
- При сроке беременности 2 недели от зачатия уровень ХГЧ составляет 25 мМЕ/мл.
- Но значения в пределах от 5 до 25 мМЕ/мл не позволяют подтвердить или опровергнуть беременность и требуют повторного исследования через 2 дня.
- **Пример расчета:**
  - Цикл – 28 дней
  - Овуляция – на 13-14 день
- Когда можно получить результат с помощью домашнего экспресс-теста на беременность по моче?
- **14 (день зачатия) + 7 (имплантация эмбриона) + 7 (диагностический уровень ХГЧ в моче) = 28 день**
- **Выводы:** Чувствительность наших тестов Evitest позволяет диагностировать беременность за 3-4 дня до предполагаемой задержки.



# EVITEST

- Чувствительность 20mME/ml.

20mME/ml – это минимальное количество гормона, на которое среагирует реагент и даст специфичное окрашивание.

mME/ml – милли Международных Единиц/миллилитр

- Точность более 99%.
- Определение беременности в первый день задержки



## Способы определения беременности

- Определение по крови – проводится в ЛПУ.
- Определение по моче, которое более подходит для экспресс-диагностики беременности.
- Механизм теста : на носитель – «промокашку» накладываются реактивы, которые при взаимодействии с содержащимся в моче гормоном дают специфическое окрашивание.



# Ассортимент тестов



## EVITEST

### Тесты на беременность:

1. Evitest One – 1 тест-полоска
2. Evitest Plus - 2 тест-полоски
3. Evitest Proof – планшетный тест-кассета с пипеткой
4. Evitest Perfect - струйный тест-кассета с держателем и колпачком
5. Evitest Supreme - струйный тест-кассета с держателем и колпачком

## EVIPLAN

### Тесты на овуляцию:

1. Eviplan – 5 тест-полосок
2. Eviplan Comfort - 5 струйных тестов + 1 тест на определение беременности



## EVITEST One

### 1 тест-полоска

Тест очень прост в применении: после вскрытия пакетика, тест-полоска пускается в ёмкость с мочой до указанного уровня на 5 секунд. Результат можно оценивать через 3-5 минут, но не более 10 минут, при комнатной температуре. Если ваш тест окажется положительным, проявятся 2 красные полоски, Вы беременны. Если у Вас появились сомнения, необходимо провести повторный тест, лучше всего утром после сна, поскольку наибольшая концентрация гормона ХГЧ при небольшом сроке беременности содержится в первой утренней моче.

## EVITEST Plus

### 2 тест-полоски

У Вас появились сомнения. Вы хотите провести повторный тест. Удобная упаковка [EVITEST](#) Plus поможет Вам! Если у Вас появились сомнения, необходимо провести повторный тест через 2 дня, поскольку концентрация ХЧГ в организме беременной женщины удваивается в течение 48 часов. Повторный тест лучше всего проводить утром, после сна, поскольку наибольшая концентрация гормона ХГЧ при небольшом сроке беременности содержится в первой утренней моче.



## EVITEST Proof

### Планшетный тест — кассета с пипеткой.

[Тест](#) второго поколения — прототип профессиональной лабораторной диагностики.

Конструкция теста исключает ошибку проведения диагностики и гарантирует Вам точный результат.

Способ применения:

Вскройте пакет, достаньте тест-кассету и пипетку. Положите кассету на горизонтальную поверхность. Наберите в пипетку небольшое количество мочи и добавьте 4 капли в круглое отверстие на кассете. Результат можно оценивать через 3-5 минут, но не более 10 минут, при комнатной температуре.







## EVITEST Perfect

Струйный тест-кассета с держателем и колпачком.

Тест третьего поколения — удобный и комфортный в обращении, обеспечивает гигиеничность выполнения диагностики и точный результат.

Способ применения:

Вскройте пакет, достаньте кассету и снимите защитный колпачок.

Помеченный стрелкой конец тест-кассеты подставьте под струю мочи на 5 секунд, закройте защитным колпачком. Результат можно оценивать через 5 минут, но не более 10 минут, при комнатной температуре.

**EVITEST — Высокая чувствительность 20mME/ml (всех тестов) позволяет диагностировать беременность уже в 1 день задержки менструального цикла или даже за 1-2 дня до ее предполагаемого начала.**



## EVITEST Supreme

Струйный тест-кассета с держателем и колпачком в ультрасовременном дизайне.

Чувствительный и стильный тест не только удобен и гигиеничен, но и гарантирует быстрый и точный результат в 1-й день задержки менструации.

Способ применения:

Вскройте пакет, достаньте кассету и снимите защитный колпачок.

Помеченный стрелкой конец тест-кассеты подставьте под струю мочи на 5 секунд, закройте защитным колпачком. Результат можно оценивать через 5 минут, но не более 10 минут, при комнатной температуре.





## Виды экспресс-тестов

Поколение	Тесты первого поколения	Тесты второго поколения	Тесты третьего поколения
Вид	Бесприборные	Приборные	
Тип	Тест - полоски	Планшетный тест-кассета с пипеткой	Струйный тест-кассета с пипеткой
Название	<b>Evitest One –</b> Для быстрого и точного результата <b>Evitest Plus –</b> Двойной тест для подтверждения результата	<b>Evitest Proof –</b> Надежный метод	<b>Evitest Perfect</b> <b>Evitest Supreme</b>
Преимущества	<b>Дешевый продукт</b>	Конструкция теста не позволяет случайно нарушить методику проведения теста	<b>Обеспечивает комфорт и гигиеничность,</b> выполнение теста возможно в любое время, в любом месте.
Недостатки	<b>Недостаточны достоверны –</b> возможна ошибка, если тест держать в жидкости мало или наоборот передержать, или погрузить выше указанной метки.	<b>Дорогой продукт</b>	<b>Дорогой продукт</b>



# Основные конкуренты

№ п/п	Фирмы-поставщики	Продукция	Производитель/страна происхождения	Чувствительность, мМЕ/мл	Срок годности	Сильные стороны конкурента
1.	Болеар-Медика ООО	<b>Frautest</b>	Human Gmbh., Германия	<b>25</b>	2 года	Известная марка, широкий ассортимент
2.	"Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания"	<b>ClearBlue,</b>	Swiss Precision Diagnostics GmbH., Швейцария	<b>30</b>	2 года	Позиционируется, как единственный цифровой тест
3.	Юнифарм-Траст	<b>Femitest</b>	Pharmline Ltd., Великобритания	<b>25, 10 на 2 новых вида Ultra</b>	2 года	Декларируют низкую чувствительность, нет клинических доказательств
4.	Протек ЦВ ЗАО, Роста ЗАО	<b>BB-Test</b>	Innotec Laboratories, Франция	<b>10</b>	2 года	Давно на рынке, декларируют низкую чувствительность, нет клинических

- **Позиционирование:**

Соотношение цена-качество оптимальное, по качеству продукции и упаковки соответствует высокому ценовому сегменту.

- **Целевая аудитория:**

Клиент – оптовые фармацевтические фирмы, сетевые и единичные аптеки, ТНП-сети.

Покупатель – женщины детородного возраста.



## Наши сильные стороны

- **Качественная продукция:**
  - чувствительность 20 mME/ml.
  - точность более 99%.
  - срок годности 2,5 года
  - сертификат CE
  - производитель HELM Medical GmbH (Германия)
- В каждой упаковке:
- **Вкладыш-инструкция** с информацией о всех видах тестов, часто задаваемые вопросы и т.д.
- В тестах Proof, Perfect, Supreme - **Женский календарик**.



- Современный дизайн упаковки
- Конкурентоспособные цены





- Производитель – Helm Medical Gbmh., Германия.
- Регистрационное удостоверение ФСЗ №2008/00092 от 26.11.2008г.
- Не относится к объектам обязательной сертификации.
- Условия хранения – при температуре от +4 до +30 град. С.
- Срок годности 2,5 года с даты производства.
- Номер партии и срок годности указаны на упаковке.





- **Высокая чувствительность 25 mME/ml**
- **Точность более 99%**
- Регистрационное удостоверение  
ФС №2006/1405 от 13 сентября 2006 г.
- Сертификат соответствия  
РОСС CN.ИМ22.C00231 от 30.01.2007 г.
- Хранить при комнатной температуре (4-30 С) в месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей и влаги.



# Attest

- Производитель: Шанхай Хемтрон Биотек Ко. Лтд. (Китай)
- Упаковка – 100 шт. в блоке / 6000 шт. в коробе
- Срок годности 2 года с даты производства.
- Дата производства, срок годности и номер партии указаны на блоке.







- Чувствительность 25 mME/ml.

25mME/ml – это минимальное количество гормона, на которое среагирует реагент и даст специфичное окрашивание.

mME/ml – милли Международных Единиц/миллилитр

- Точность более 99%.



**ЭВИПЛАН** — это диагностический одноэтапный экспресс-тест для определения выброса лютеинизирующего гормона (ЛГ) в организме женщины.

ЛГ (лютеинизирующий гормон) — гормон фертильности — содержится в моче каждой здоровой женщины. Его количество резко возрастает в середине менструального цикла. Увеличение количества ЛГ запускает овуляцию, во время которой высвобождается яйцеклетка, готовая к оплодотворению. Овуляцией называется процесс высвобождения и выхода созревшей и готовой к оплодотворению яйцеклетки. Овуляция происходит в течение 24-48 ч после позитивного теста.

## **КОГДА НАЧИНАТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ?**

Перед началом теста нужно определить продолжительность вашего менструального цикла. Если Ваш цикл короче 21 дня или длиннее 38 дней, обратитесь, пожалуйста, к врачу. Если Вы не знаете продолжительность своего менструального цикла, можно **начать тестирование на 11-й день настоящего цикла** исходя из того, что средняя длительность цикла составляет 28 дней

## **Продолжительность применения**

Проводите одну процедуру тестирования каждый день в течение 5 дней или до тех пор, пока не определите выброс ЛГ. В случае если в течение трех менструальных циклов повышения ЛГ не будет обнаружено, обратитесь к врачу.

## **Проведение теста**

### **Рекомендации.**

Синтез ЛГ происходит рано утром, проявление его в моче наступает в течение дня. Лучшее время для диагностики с 10.00 до 20.00. Всегда тестируйтесь в одно и тоже время. Необходимо сократить количество употребляемой жидкости и воздерживаться от выделения мочи за 2-3 часа до проведения теста.





## Тест для определения овуляции Eviplan

5 тестов  
Для домашнего тестирования  
Высокая чувствительность 25mME/ml.  
Точность более 99%  
Результат через 5 минут

### Способ применения

- Вскройте пакет и достаньте тест-полоску.
- Тест-полоску опустите в емкость с мочой до указанного уровня MAX на 5 сек.
- Положите тест-полоску на ровную поверхность, результат можно оценивать через 5 мин. при комнатной температуре, но не позже 10 мин.



## Тест для определения овуляции Eviplan Comfort (струйный)

5 тестов  
Для домашнего тестирования  
Высокая чувствительность 25mME/ml.  
Точность более 99%  
Результат через 5 минут

Вскройте пакет, достаньте струйную тест-кассету и снимите защитный колпачок.

Помеченный стрелкой конец тест-кассеты подставьте под струю мочи, закройте защитным колпачком.

Результат оценивать через 3-5 минут при комнатной температуре.

Тест третьего поколения — удобный и комфортный в обращении, обеспечивает гигиеничность выполнения диагностики и точный результат.



# Наши сильные стороны

- **Качественная продукция:**

- чувствительность 25 mME/ml.

- точность более 99%.

- производитель HELM Medical GmbH (Германия)

- **Вкладыш-календарик**

- **Вкладыш-инструкция**



- **Современный дизайн упаковки**

- **Конкурентоспособные цены**



# Основные конкуренты

№ п/п	Фирмы- поставщики	Продукция	Производитель/ страна происхождения	Чувств ительн ость, мМЕ/ml	Сильные стороны конкурента
1.	Болеар-Медика ООО	<b>Frautest</b> – тест-полоски №5, струйный №7	Human Gmbh., Германия	<b>25</b>	Известная марка, широкий ассортимент, давно на рынке
2.	"Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания"	<b>ClearPlan</b> – струйный №5	Swiss Precision Diagnostics GmBH., Швейцария	<b>25</b>	Позиционируетс я, как единственный цифровой тест
3.	Фарммедтех ООО	<b>Ovuplan</b> - тест-полоски №5, струйный №1	Leb International., США	<b>25</b>	Более известная марка, давно на рынке
4.	Юнифарм-Траст	<b>Femitest</b> – тест-полоски №5	Pharmline, Великобритания	<b>25</b>	

- **Позиционирование:**

Соотношение цена-качество оптимальное, по качеству продукции и упаковки соответствует высокому ценовому сегменту.

- **Целевая аудитория:**

Клиент – оптовые фармацевтические фирмы, сетевые и единичные аптеки.

Покупатель – женщины детородного возраста.





# Насадки на узи EVISONIC

**НАСАДКА ДЛЯ УЗИ EVISONIC** рекомендована для использования со всеми видами ректо-вагинальных датчиков аппарата ультразвукового исследования.

Без смазки.



**Evisonic** — единственный продукт на российском рынке в данной группе товаров, имеющий надлежащий сертификат соответствия и регистрационное удостоверение Минздрава РФ.

В отличие от часто используемых во время УЗИ презервативов, насадки Evisonic имеют специально — адаптированный размер. Отсутствие смазки и накопителя предотвращает появление помех при проведении исследования.

Срок годности — 5 лет



# Конкуренты

На рынке представлены презервативы для УЗИ под торговыми марками VIZIT и VIVA.

Насадка для УЗИ **НЕ** является презервативом, так как не является механическим мужским контрацептивом и не имеет накопителя.



# EVITEST

## Программа продвижения – первая в России

- Рекламная акция «I'm pregnant» - NEW!!!

Онлайн-консультация и самая большая в русскоязычном сегменте

Интернет-площадка, посвященная планированию беременности, беременности, родам и женскому здоровью – интернет проект Я БЕРЕМЕННА

[www.iampregnant.ru](http://www.iampregnant.ru)

**Цель** – продвижение продукции, стимулирование сбыта, завоевание рынка

**Территория** - Россия

**Сроки** - февраль 2009г.

Покупателю Evitest необходимо позвонить по номеру телефона, указанному на внутренней упаковке, ввести PIN-код и получить консультацию у лучших специалистов страны в области гинекологии и эндокринологии



# Наша стратегия

- Полное и актуальное товарное предложение аптекам:

Attest – дешевый тест на беременность

Evitest – 5 видов дорогих тестов на беременность

Eviplan и Eviplan Comfort– тесты на овуляцию

# Основные принципы размещения


- На витрине вместе со всеми
- В месте наибольшей визуальной доступности для покупателя
- Пятном
- На уровне глаз (желательно)
- Лицом к покупателю
- Наличие и размерное соответствие ценника
- Аккуратность
- Наличие рекламных материалов в зонах наибольшего покупательского потока.



# Основные принципы размещения на витрине в аптеках



# Тесты. Россия. Продажи в штуках в 2012 г.

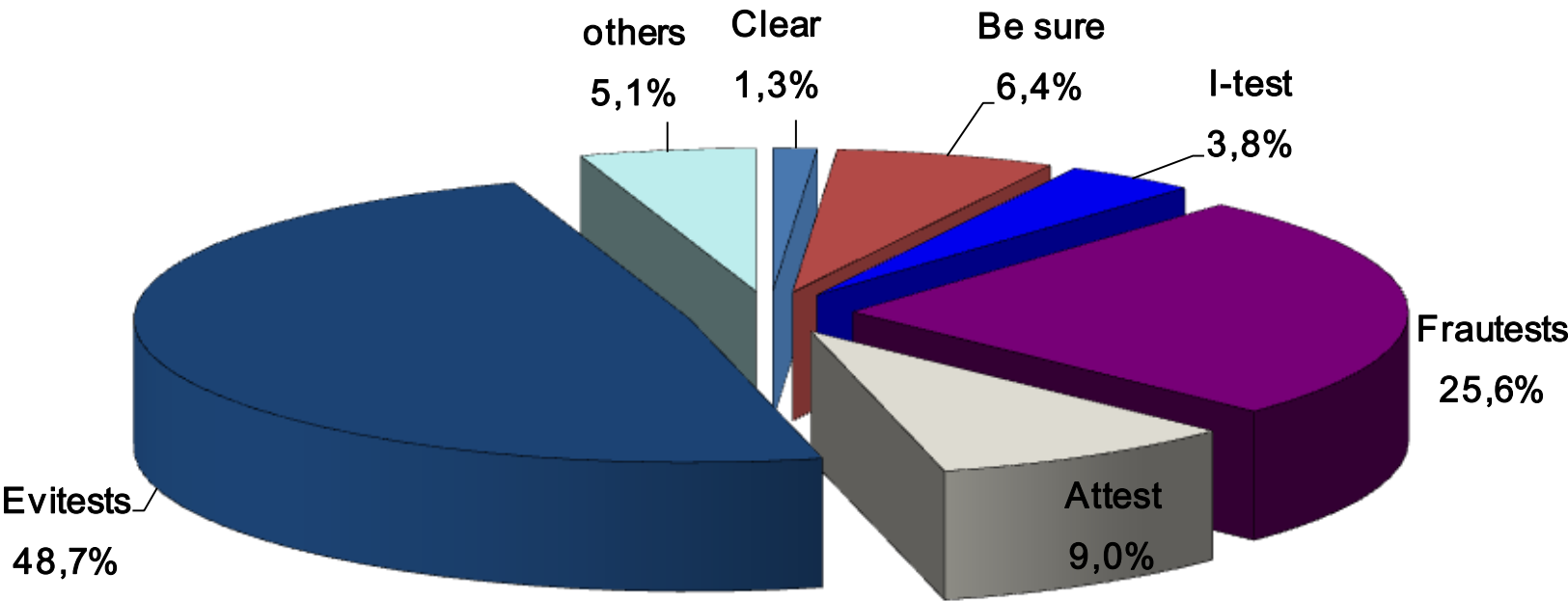

Evitest	19 000 000	Clear	500 000		
Attest	3 500 000	I-Test	1 500 000		
Frautest	10 000 000	Be Sure	2 500 000	Others	2 000 000

Тесты. Россия. Доля рынка в 2012 г.

